

オーティコン コネクティビティ

周りや世界ともっと  
つながり続けるために



**oticon**  
life-changing technology

## 日々の聞こえをもっと豊かに 仕事も、学びもより楽に


オーティコンのワイヤレスアクセサリー「コネクティビティ」は、補聴器の聞こえやコミュニケーション体験を高めるために開発された、使いやすくそして総合的なシリーズ製品です。

コネクティビティシリーズ製品は、お客様の補聴器を最大限に活用いただくことに役立ちます。※例えばテレビ、スマートフォン、音楽プレイヤー、パソコンからの音をワイヤレスヘッドフォンのように直接耳もとへと届けます。

### オーティコンON アプリを使って補聴器を操作【無料】

オーティコン ONアプリを活用し、補聴器の音量調整や、プログラムを切り替え、ヒアリングフィットネス機能による補聴器装用状況の確認、またTVアダプターなどとの併用時にはリモコン機能も活用いただけます。

\* 2.4 GHz Bluetooth® 低エネルギー搭載のオーティコン補聴器との互換性

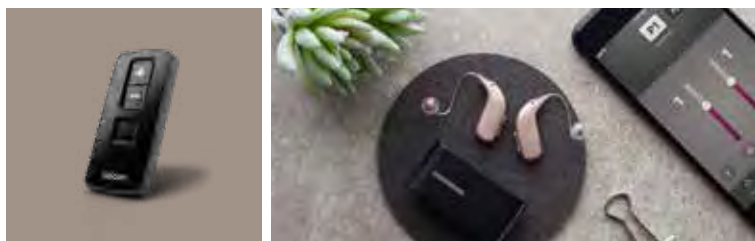

### 子どもたちを世界につなげる

オーティコンの小児用補聴器は、子どもたちにとって補聴器だけの存在ではありません。現代社会に羽ばたく子どもたちが世界と垣根無くつながることを支えます。大人のための総合的なワイヤレスアクセサリー製品シリーズに加えて、エデュマイクをご紹介します。エデュマイクは、子どもたちが学校で直面する、日々の喧噪のなかでの聞こえの課題を解決するために設計されています。

12ページも参照ください。



## 簡単、安心 シンプル操作で通話も楽しく

2.4GHz 低エネルギー技術を搭載したオーティコンの補聴器は、iPhone®との直接接続が可能、またその他のスマートフォンは、コネクタクリップの併用で電話通話が楽しめます。



Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod Touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Android および Android ロゴ、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。

スマートフォンでのハンズフリー通話  
コネクタクリップをご使用いただくと、iPhone、Android™スマートフォンなどのスマートフォンを使って簡単にハンズフリー通話ができます。

コネクタクリップはスマートフォンからの通話を直接補聴器に送信、またコネクタクリップの内蔵マイクはあなたの声をクリアに届けます。コネクタクリップとの組み合わせによって補聴器が高品質なワイヤレスヘッドセットになります：

- 外出先などでもハンズフリーでの発信および受信が可能に - 両耳へのストリーミング
- スマートフォンから補聴器へ音楽、ビデオ、その他の音声をワイヤレスでストリーミング音量を変えたりや、プログラムの切り替えを行うリモコンとしても



お使いの補聴器は **Made for iPhone** 補聴器です。

- iPhone、iPad®、または iPod touch®と直接接続ができます。
- 補聴器がステレオヘッドフォンのように機能します。
- 通話、音楽、ビデオなどの音声を補聴器に直接ストリーミングできます。
- iPhoneを使用して音量を調節、プログラムの変更ができます。







## みんなの話が もっとクリアに

先進の補聴器を使っても、特に騒がしい場所、講義や会議、自宅の電話やコンピューター越しに話すときなど、誰かが話している内容をはっきりと聞くのが難しい場面があります。

コネクタクリップならば、補聴器に直接音声をストリーミングして、これらすべての状況でより良い聞こえを届けます。背景騒音が低減され、聞きたい人の声がかっと聞き取りやすくなります。

### 離れた場所や騒音下で音声を聞く

- コネクタクリップを、話を聞きたい相手に渡して、リモートマイクとして使用します
- コネクタクリップは、話者の声を補聴器に直接ストリーミングできます
- オーティコンON アプリとの併用で、コネクタクリップの音声の音量と背景騒音を制御します
- 通信範囲: 20mまで




### コンピューターでのチャット

- コネクタクリップをお使いのPCとペアリングしてもご使用いただけます。
- コネクタクリップを使用したSkypeなどのチャット、またはビデオを見たりするときにも補聴器に直接音声をストリーミングします。
- 通信範囲: 10mまで

### ご家庭の固定電話で話す

- 電話アダプター2.0をご家庭の電話システムに接続
- コネクタクリップを使用して電話に回答
- 電話の発信者の声が補聴器に直接届きます。
- 通信範囲: 30mまで

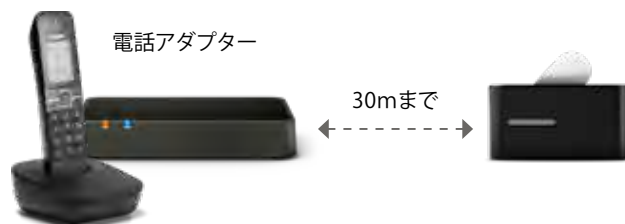



## 補聴器をリモート操作

補聴器の音量を調節、プログラムを変更、またはミュートにしたい場合は、オーティコン ONアプリ、コネクタクリップ、またはリモートコントロールの3つのいずれを介してもこれらの操作ができます。

## 補聴器に直接音を届ける

テレビアダプター3.0をご使用いただくと、お気に入りのテレビ番組を楽しんだり、ステレオで音楽を聴いたりワイヤレスステレオヘッドフォンを装着しているかのように直接補聴器で聴くことができます。

### テレビアダプターでできること:

- 補聴器に直接音声をストリーミングして、テレビをよりはっきりと聞いたり、ご家庭のオーディオシステムとつないで音楽を聴くこともできます。
- 家族と一緒にいる時もテレビの音量はそのまま、ご自身の聞きたい音量に調整できます。
- 補聴器は最大4台までテレビアダプターをペアリングでき、それぞれを切り替えることができます(追記:VeloxSシリーズ補聴器のみ)
- オーティコンONアプリをリモコンのように利用して音量を調整することが可能です。
- 通信範囲: 15mまで



# オーティコンONアプリで 補聴器をブーストアップ



## オーティコン ONアプリを使って、補聴器を簡単に そして目立たず調節

iPhoneとAndroidスマートフォンでご利用いただける  
オーティコンONアプリは幅広い機能を提供します：

- 補聴器プログラムの切り替え
- 音量調整
- 電池残量確認
- 補聴器を探す機能
- ヒアリングフィットネス機能
- IoT (IFTTTウェブサービス)

オーティコンのウェブサイトも参照ください  
[www.oticon.co.jp](http://www.oticon.co.jp)

## もっともサポートが必要な時に聞こえをブーストアップ

日常で、騒音の中など会話の聞き取りのサポートがより必要と感じる場面で、オーティコンONアプリのブースター機能を使用して、補聴器からよりサポートが得ることができます。

\* オープン、シヤ、ルビー及びエクシード3はオープンサウンドブースターは非対応

## アプリをご利用いただくには

1. APP StoreまたはGoogle PlayからオーティコンOnアプリをダウンロードします。
2. オーティコン補聴器を iPhone、iPad、Android™ スマートフォンまたはタブレットとペアリングします。
3. 準備は完了です。



Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod Touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。AndroidおよびAndroid ロゴ、Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。





## 日常のあらゆる聞こえの機会を逃さない

重要な情報を聞き逃さない、それはときに難しい課題です。たくさんの人がいるにぎやかな場所で誰かの話しを聞く—これは難しい場面の一つです。

講演会や学校、劇場など話者や音源と距離が離れている場所、またスポーツ中に相手の声を聞くことも難しい課題の一つです。

オーティコンのエデュマイクは、話者の声をユーザーの補聴器に直接送信することでこれらの問題を解決します。使いやすく目立たない、シンプルな操作性のリモートマイクです。公共の場所などに設置されたヒアリングループシステムから音声を拾って補聴器に送信するテレコイルも備えています。

エデュマイクは、PC、タブレット、スマートフォンや電子黒板などさまざまな種類のオーディオ電子機器からの音声ストリーミングが可能です。また一般的な3.5 mm ヘッドフォンジャックを介した接続も可能です。

## 喧噪に満ちた環境で、子どもたちの聞こえをサポート

難聴のある子どもたちにとって、にぎやかな教室は試験の場でもあり、周囲の会話についていくことに難しさを感じています。このような場所で、エデュマイクは、先生の声を子どもたちの補聴器に直接届けることで、より効果的に子どもたちの学習をサポートします。

学校以外でも、エデュマイクは子どもたちにとってかけがえのないつながりを創り出します。家庭では、エデュマイクをオンにすれば、テレビがついていても、兄弟げんかの最中であってもエデュマイクはあなたの声を常にお子さんの耳に直接届けます。さらに、遊び場で、買い物中やその他の騒がしい環境でエデュマイクをお使いいただけます。

### EduMic(エデュマイク)

カラー／ホワイト

サイズ／H66×W30×D22mm

重さ／36g

電池および電池寿命／約2年  
(リチウム電池で通常使用)

98,000円(税別)



## 補聴器専門家との遠隔での コミュニケーションが可能に

補聴器のメリットを最大限に活用いただくために、補聴器専門家との二人三脚が欠かせません。テクノロジーの進化で、遠隔で補聴器の微調整などサポートを受けることも可能になりました。大切な問題は、直接会って相談いただく必要があり、これに代わるものではありませんが、日常的な調整などは、ご自宅などいつもの環境からリラックスして相談いただけます。

### Oticon RemoteCare アプリでできること:

- ・ご自宅や職場などで自身の都合に合わせて、いつもの店の専門スタッフと遠隔でフォローアップ相談を行うことができます。\*
- ・補聴器調整のために、販売店へ足を運んでいただく時間を節約できます。
- ・遠隔セッション中には、担当スタッフと対面での会話や、テキストメッセージのやりとりができます。
- ・専門スタッフは、遠隔で補聴器調整を行い、補聴器を最大限活用できるようサポートします。
- ・相談しながら、補聴器の新たな設定などをテストできます。



オーティコンリモートケアアプリは **App Store** または **Google Play** からダウンロード可能です。

リモートケアサービスをご利用できるかどうかは販売店によって、またお使いの補聴器によっても異なります。サービスについてはお買い上げの販売店へご相談ください。

\* 技術要件: リモートケアサービスに対応したワイヤレス補聴器をお持ちであること、また安定したインターネット接続環境が必要です。iOS12以降搭載のiOS製品、およびOS 8.以上のリモートケアAPPと互換性のあるAndroid製品が必要です。互換性についてはオーティコンのHPを参照ください。

[www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/support/faq/compatibility](http://www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/support/faq/compatibility)

## 日常をより便利にするための オーティコン コネクティビティ製品

### テレビアダプター 3.0

迫力のステレオ音声を好みの音量で、補聴器に直接届けます。補聴器をワイヤレスヘッドフォンのように使うことができ、オーディオシステムやホームエンターテインメントシステムとの接続も可能です。

カラー／ブラック  
サイズ／H21×W124×D80mm  
重さ／107g  
テレビアダプター 3.0 使用時のワイヤレス通信範囲／最大15m  
**28,000 円**(税別)



### リモートコントロール 3.0

ボリューム調整やプログラムの変更などを、手元の操作で簡単に行うことができます。

カラー／ブラック  
サイズ／H75.3×W35×D12mm  
重さ／32.7g (電池含む)  
通信範囲／最大1.8m  
電池および電池寿命／約1年 (単6電池で通常使用)  
**20,000 円**(税別)




### 電話アダプター 2.0 (FW2.0)

自宅や職場の固定電話と接続して、補聴器へ相手の声を直接届けます。

※電話アダプター2.0を補聴器と使用する場合はコネクタクリップが必要となります。

カラー／ブラック  
サイズ／H21×W124×D80mm  
重さ／100g  
通信範囲／最大30m  
**28,000 円**(税別)

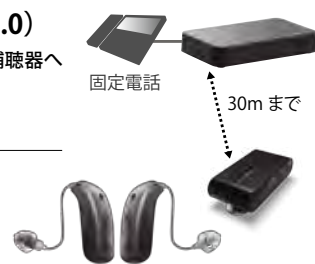

### コネクタクリップ

ご自身の胸元などにつけて使い、固定電話からの声やスマートフォンからの音を直接補聴器で聞くことができます。また話し手の胸元につけてもらうことでリモートマイクとして使うこともできます。

カラー／ブラック  
サイズ／H53×W27×D18mm  
重さ／27g  
電池および電池寿命／約2年 (リチウム充電池で通常使用)  
**50,000 円**(税別)





“Life-changing technology”は、難聴者を中心に考え、聞こえに悩む人々の人生を変える(Life-changing)ために、最先端の技術(Technology)を提供しつづける、という2つの理念をあらわしています。

オーティコンのワイヤレスアクセサリ製品は下記のシリーズ製品と互換性があります：

- オーティコン オープンS
- オーティコン オープンプレイ
- オーティコン オーティコンエクシード
- オーティコン オーティコンエクシードプレイ
- オーティコン オープン
- オーティコン ルビー
- オーティコン シヤ

製品の互換性の詳細については、お店で相談いただくかまたは次のWebサイトにアクセスしてください。

[www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/support/faq/compatibility](http://www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/support/faq/compatibility)

オーティコン補聴器のご相談・ご用命は