

life-changing
technology



OTICON | More

オーティコン | モア

あらゆる音を 全貌で捉えるから 脳は音の意味を理解する

脳の本来の働きをサポートする補聴器

オーティコン モアの安心保証制度(国内/国際)

国内保証

お買い上げ日から保証期間内に通常のご使用で生じた自然故障に関し、
無料修理を保証します。

More 1：お買い上げ日より3年間

More 2、More 3：お買い上げ日より2年間

国際保証 1年間

日本国外でも保証条件を満たしたものは、無料修理が可能です。

More 1、More 2、More 3 ともにお買い上げ日より1年間

お買上 保険特約

お買い上げいただいた補聴器が火災・盗難にあった場合、お買い上げ日
より1年間、無料修理または同等器種再交付の補償をいたします。

More 1、More 2、More 3 ともに共通

※補聴器は適切なフィッティング調整により、効果が発揮されます。
しかし、装用者の聞こえの状態によっては、効果が異なる場合があります。
※補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察を
受けられることをお勧めします。

oticon
life-changing technology

オーティコン補聴器

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16F

電話：044-543-0615 (代) ファックス：044-543-0616

www.oticon.co.jp

第2種医療機器製造販売業許可番号：14B2X10013

医療機器製造業許可番号：14BZ200105

オーティコン補聴器のご相談・ご用命は

※製品の仕様は品質向上のために予告なしに変更する場合があります。
このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

2021.02.40000



oticon
life-changing technology

さあ、人生をより楽しむ時です。



音を制限してしまうと脳は情報不足になる

周りで何が起きているか、もっと聞けたら素晴らしいのと思ったことはありませんか？

従来の技術の補聴器ではこれを実現できませんでした。正面からの人の声に焦点をあてることを目的に設計されているためです。この方法は難聴への対処方法としては理想的とはいえないものでした。

このような制限された聞こえの世界では、刻々と変わっていく音環境の中で会話についていくことは困難です。さらに、自然に聞くために不可欠な周囲の環境音を聞くことはほとんど不可能です。音を絞り込むことで脳が必要とする音情報が届かないことが最大の問題です。

脳はより多くの音情報を求めている

たとえ静かな場所でも、あなたの周囲には常に音があります。360°に広がる音の空間は、そこがどこであっても刻一刻と変化し、予測不能です。そして、それはときに、会話音声だけでなく、自然の音や、町の喧騒などには豊かな音を含んでいます。したがって、脳はこのすべての複雑さに対処し、音の意味を理解するよう進化してきました。

オーティコンは聞こえに関する脳の仕組みを深く理解し、それをサポートする技術を研究開発してきました。近年、第三者の新しい研究により、脳がことばの意味を自然に理解するためには、周囲のあらゆる音を捉えることが必要であることが明らかになりました*。

人は耳ではなく脳で聞いています。

耳で音を捉え、脳がそれぞれの音を識別し位置を特定し、どの音に集中するかを選択するのです。

*O'Sullivan, et al (2019). Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. (2017).

オーティコン モア 脳をサポートするよう 設計された補聴器



オーティコン モアはもっと豊かに周囲のあらゆる音を 届けられます

オーティコン モアは、周囲のあらゆる音を届けることで、脳をサポートするという脳から聞こえを考えるオーティコン独自のコンセプトであるブレインヒアリングの哲学を表現しています。

オーティコンモアは人工知能(AI)を搭載。補聴器の心臓部「ポラリスチップ」により高度なAI技術、「**ディープニューラルネットワーク(DNN)**」を直接組み込むことでオーティコン史上最も高度な知能を持つプラットフォームを実現しました。脳の機能を模倣するDNNは、1200万種の音やその変化を詳細に認識し、実環境で脳に理想的な聞こえを届けるには、どうあるべきか対応できるよう学習済みです。

オーティコン モアの聞こえによって、脳が周囲の音の情景を、バランスよく詳細に描き出すことができるため様々な聴取環境下でより多くの聞こえが得られます。

ディープニューラルネットワークを搭載

DNNは、1200万の現実世界の様々な音を学習済みです。この搭載された人工知能(AI)により、個々のサウンドを詳細かつ明瞭に届けます。



あなたの生活を より便利にするために

スマートフォンや様々なデジタル機器ともつながる補聴器

ワイヤレスでの音楽鑑賞や電話通話なども
気軽に楽しめます



使いたいデバイスに接続する

オーティコン モアを使ってテレビやスマホなど様々な
デバイスから高音質なストリーミングが可能です。



iPhone®製品 Android™デバイスからの 直接ストリーミング

iPhone、iPad®、Androidデバイス*からの高音質の直接
ストリーミングをお楽しみ頂けます。



スマートフォンでの通話時にワイヤレスイヤホンとして使用
コネクタクリップを介してスマートフォンでの通話時に補
聴器をワイヤレスイヤホンとして使用することが可能です。



TVからのストリーミング

オーティコンのTVアダプターを併用することで、テレビ
からの音声を直接ストリーミングできます。



リモートマイクとの接続

コネクタクリップを使って、特定の話者の声を補聴器へ
ワイヤレスストリーミングできます。

詳細な情報は下記を参照ください。

oticon.co.jp/connectivity

*オーティコン モアと直接接続するにはAudio Streaming for Hearing Aids (ASHA)に
適合しているAndroidデバイスである必要があります。ASHA (補聴器用オーディオス
トリーミング): Android 10 以上で、ASHA 対応機種に対応、その他のアンドロイド端
末ではコネクタクリップを併用。

テレビアダプター 3.0

迫力のステレオ音声を好みの音量で、補聴器
に直接届けます。補聴器をワイヤレスヘッ
ドフォンのように使うことができ、オーディオ
システムやホームエンターテインメントシ
ステムとの接続も可能です。

カラー／ブラック
サイズ／ H21×W124×D80mm
重さ／ 107g
テレビアダプター 3.0 使用時のワイヤレス通信範囲／最大15m
30,800円




電話アダプター 2.0 (FW2.0)

自宅や職場の固定電話と接続して、補聴器へ
相手の声を直接届けます。

※電話アダプター2.0を使用する場合はコネクタクリップが必要
となります。

カラー／ブラック
サイズ／ H21×W124×D80mm
重さ／ 100g
通信範囲／最大 30m
30,800円

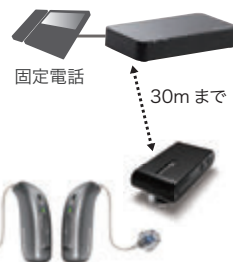

コネクタクリップ

ご自身の胸元などにつけて使い、固定電話からの
声やスマートフォンからの音を直接補聴器で聞く
ことができます。また話し手の胸元につけてもら
うことでリモートマイクとして使うこともできます。

カラー／ブラック
サイズ／ H53×W27×D18mm
重さ／ 27g
電池および電池寿命／リチウム電池 約2年 (通常使用)
55,000円



※表示価格はすべて税込価格です。

より楽に より多く聞ける



脳にとってより楽なことを証明

研究を通じて、オーティコン モアが脳内で音を最大60% 明瞭にすることが判明しました*。これは、周囲の声や音をどれだけ聞き取りやすくなるかを正確に示しています。

実際、当社前世代製品と比較して周囲で交わされている会話の内容が15%多く理解できるため、会話を覚える力が向上します*。

* VeloxSとの比較 Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.

スマートフォンとの 次世代接続が可能に

iPhone® とAndroid™デバイスも直接接続


- 2.4GHz 低消費電力 Bluetooth技術を搭載、日常の中で高品質のリスニング体験をサポートするための幅広い接続オプションを備えています
- Made for iPhone 補聴器であり、Androidの新たなプロトコルである、補聴器用のオーディオストリーミング (ASHA) との互換を持ち、iPhone、iPad®、iPod touch®、Android端末から直接ストリーミングが可能です*
- その他のBluetoothデジタル機器とは、コネクタクリップを併用して接続いただけます

*ASHA (補聴器用オーディオストリーミング): Android 10 以上で、ASHA 対応機種に対応、その他のアンドロイド端末ではコネクタクリップを併用。



オーティコン ONアプリ — 指先でコントロール

オーティコン ONを使用すると、ストリーミング中に音響を微調整できる**新機能のストリーミングイコライザー**を使って聞こえを個別化できます。また、音量調節、プログラムの切り替え、バッテリー残量の確認、その他のオーティコン製品のコントロールを行うこともできます。「補聴器を探す」機能も活用頂けます。

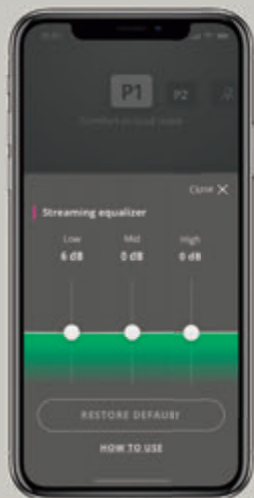

Apple, Apple のロゴ、iPhone、iPad、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Android、Google Play、Google PlayロゴはGoogle LLCの商標です。



オーティコン リモートケア — お客様とオンラインでの補聴器調整が可能になります

オーティコン リモートケア (Oticon RemoteCare) サービスによって、お客様とリモートで接続し、フォローアップや定期的な調整をご提供します。また、お客様はご自宅など好きな場所からリモート接続が可能なので、移動の手間や時間を減らし快適に調整を受けられます*。

*対応可能が取り扱い販売店様にご確認ください。



Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0 ライセンスに記載された条件に従って使用しています。



より高い生活の質 (QOL) を 提案します



毎日、一日中使える容量を

充電式のオーティコン モアには、携帯電話や音楽鑑賞、テレビ視聴などストリーミングを楽しむ場合も含めて、1日を通じた快適な聞こえのために必要なバッテリー量を、たった3時間でフル充電できるスタイリッシュな充電器が付属しています*。

- 置くだけシンプル充電 = 手間いらず
- 30分のクイック充電で6時間使用可能
- 便利で使いやすい

NEW

ミニフィット オープンベースドーム

オープンフィッティングの機会を広げ、
低～中音域の音質も高めます。



*リチウムイオン充電電池のパフォーマンスは、難聴の程度、ライフスタイル、ストリーミングの使用状況によって異なります。



自分にぴったりの色を見つけましょう

オーティコン モアは、肌や髪の色に合わせた7色に、華や
いだピンクを加えた全8色をご用意しています。



シルバー



ライト・グレー



ダーク・グレー



ダイヤモンド・
ブラック



コッパー・ブラウン



テラコッタ・ブラウン



ベージュ



ヒア・ピンク

オーティコン モアの機能・性能について
詳しく知りたい場合は、
聴覚ケアの専門家に相談するか、
oticon.co.jp/more
を参照ください。





スタイル

ミニRITE R
(充電式)

装着イメージ
(ドーム装着時)

適合範囲	軽 重 60・85・100・105
使用電池	充電電池
外部機器対応 (Bluetooth 通信)	○

【 価 格 】 オープン価格 (補聴器本体は非課税です)

	More 1	More 2	More 3
BrainHearing™ テクノロジー	○	○	○

ことばの聞き取り			
モアサウンド・インテリジェンス	Level 1	Level 2	Level 3
ー 環境設定	5オプション	5オプション	3オプション
ー バーチャル外耳	3段階	1段階	1段階
ー 空間バランサー	100%	60%	60%
ー ニューラルノイズ抑制 難しい環境 / シンプルな環境	10dB / 4dB	6dB / 2dB	6dB / 0dB
ー サウンドエンハンサー	3段階	2段階	1段階
モアサウンド・アンプリファイア	○	○	○
モアサウンド・オプティマイザー	○	○	○
音空間認知機能	4つの帯域	2つの帯域	2つの帯域
小声強調機能	○	○	○
スピーチレスキュー	○	○	○

音 質			
クリアダイナミクス	○	○	—
信号処理チャンネル	64ch	48ch	48ch
フィッティング周波数帯域	10kHz	8kHz	8kHz
低域ブースト (ストリーミング時)	○	○	○
デジタルチップ	Polaris	Polaris	Polaris

快適な聞こえ			
突発音抑制	4段階	3段階	3段階
日本語仕様 (VAC-J)	○	○	○
ウインドノイズマネジメント	○	○	○

コネクティビティ			
ストリーミング (2.4GHz 低消費電力 Bluetooth)	○	○	○

- モアサウンド・インテリジェンス**
周囲360°の音をクリアで完全なバランスをとってその情景を届けます
- バーチャル外耳**
より良い空間の中で音のバランスを提供
- サウンドエンハンサー**
ノイズのある聞き取りの難しい環境でも、スピーチを強調して聞き取りを助ける
- モアサウンド・アンプリファイア**
音の情景の変化に即応する高解像度増幅
- モアサウンド・オプティマイザー**
ハウリングを予防し、最適な音量で聞こえをサポートします。軽度から高重度まで装着感を向上します。
- 音空間認知機能**
もっとも興味をひかれる音を見つけ出す能力を高める
- 小声強調機能**
「サ」や「タ」など、聞き分けに必要な情報を強調
- スピーチレスキュー**
高周波数帯の音をより聞こえやすくする
- クリアダイナミクス**
騒がしい環境でも、ゆがみのない高音質を実現
- ウインドノイズマネジメント**
風切り音を軽減し、風が吹く環境での言葉の聞き取りを高める

場所を選ばない防水性能 (日常生活防水仕様)

IP68

オーティコン モアは、防水・防塵の国際保護等級IP68*を取得しています。さまざまな天候や環境でも安心してご使用いただけます。また低アレルギー素材を使用し、安心・安全面も考慮された補聴器です。

*デンマーク本社にて第三者機関による認証「IP68」を取得。

